

## Information utilisateur

**Mécanisme d'action :** L'eau injectée par le biais de la clystère ramollie et dilue les selles tout en activant la dilatation du gros intestin. Si la quantité d'eau injectée est suffisante, elle provoque des mouvements de transports reflex et aboutit à la défécation.

**Possibilités d'utilisation :** Pour vider plus rapidement le gros intestin en cas d'occlusion ou pour activer l'activité de l'intestin en cas de constipation, pour contrôler la défécation en cas d'incontinence fécale. En médecine naturelle: pour nettoyer l'intestin, lors des périodes de jeûne par exemple.

**Autres possibilités spécifiques d'utilisation (pour professionnels) :** Pour une évacuation rapide du gros intestin avant une opération, un accouchement ou une rectosigmoidoscopie, un examen du bas-ventre, pour un lavement contrôlé en cas de colostomie.

**Ne pas pratiquer de lavement intestinal dans les cas suivants :** En cas de maladies intestinales ou abdominales sévères (en cas de maux de ventre et de vomissement inexpliqués), blessures au niveau de l'anus.

**Avertissements et mesures de sécurité :** N'utiliser que de l'eau propre (qualité de l'eau potable). Enduire l'extrémité de la sonde rectale de lubrifiant afin d'éviter toute irritation mécanique de l'anus. En cas de résistance ou de douleurs lors de l'introduction de la sonde rectale, interrompre l'opération et consulter un médecin.

**Lavement pendant la grossesse :** Les femmes enceintes peuvent procéder à un lavement jusqu'à la 20<sup>ème</sup> semaine de grossesse pour vider l'intestin. À partir de la 21<sup>ème</sup> semaine de grossesse, le lavement ne devrait être effectué que sur conseil d'une sage-femme ou d'une gynécologue ; les contractions pouvant être provoquées dans certaines circonstances.

**Utiliser chez les enfants et les adolescents :** Nous recommandons l'utilisation des lavements uniquement avec le consentement de l'enfant et d'ajuster la quantité d'eau en fonction de l'âge.

### Mode d'emploi :

Rincez la bouteille à l'eau claire avant la première utilisation. Lavez-vous soigneusement les mains avant et après l'irrigation.

**Préparation :** Remplir le flacon d'eau courante propre à température ambiante, visser le bouchon, relier la valve anti-retour, la sonde anale et le tuyau de rallonge au flacon (pince en option). Disposer près de soi les gants, le lubrifiant, des alèses imperméables et une poubelle.

**Remarque sur le tube intestinal :** Le tube intestinal présente deux ouvertures latérales arrondies permettant la sortie de l'eau. Dans de rares cas, on estime que l'ouverture n'est pas assez arrondie. Examinez le tube intestinal avant de l'utiliser.

**Utilisation par le patient :** S'asseoir confortablement sur les toilettes ou se coucher sur le dos en position détendue puis introduisez délicatement la sonde rectale de quelques centimètres. Retourner le flacon et injecter l'eau dans le gros intestin en pressant manuellement le flacon pour pomper le liquide. Tirer ensuite la sonde rectale et vider l'intestin. Répéter l'opération si nécessaire.

### Starter Set "Basic"

REF PR101

Composition : 1 flacon 750ml avec valve d'aération  
1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour  
3 sondes rectales

### Starter Set "Plus"

REF PR102

Composition : 1 flacon 750ml avec valve d'aération  
1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour  
6 sondes rectales  
1 trousse de rangement

### Accessoires de rechange

REF PR103

Composition : 1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour  
20 sondes rectales

### Starter-Set "Basic" confort

REF PR104

Composition : 1 flacon 750 ml avec valve d'aération  
1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour  
1 tuyau avec deux entonnoir  
1 sonde rectale avec forme d'olive

### Starter-Set "Plus" confort

REF PR105

Composition : 1 flacon 750 ml avec valve d'aération  
1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour  
1 tuyau avec deux entonnoir  
1 sonde rectale avec forme d'olive  
"Plus" : 1 trousse de rangement

### Accessoires de rechange confort

REF PR106


Composition : 1 tuyau de rallonge avec valve anti-retour  
3 tuyaux avec deux entonnoir  
3 sondes rectales avec forme d'olive

**Pour le personnel soignant lors d'une utilisation sur un patient :** Coucher le patient sur le côté gauche, genoux repliés. Insérer délicatement la sonde rectale. Retourner le flacon et laisser couler l'eau dans le gros intestin. L'insertion de liquide peut être interrompue simplement en utilisant la pince. Enlever la sonde rectale. Si besoin, aider le patient lors de l'excrétion.

**Recommandations pour le nettoyage et la réutilisation :** Par mesure d'hygiène nous recommandons l'utilisation exclusivement individuelle de la clystère. Nettoyage des éléments flacon avec le bouchon, le tuyau de rallonge avec valve anti-retour avec de l'eau savonneuse après l'usage. La sonde rectale et la sonde rectal avec la forme d'olive sont destinés à un usage unique.


**Instruction de rangement :** Sécher les éléments à l'abri de la poussière.

**Plus d'informations disponibles sur :** [www.reprop.de](http://www.reprop.de), [www.reprop.fr](http://www.reprop.fr)


 Practomed UG, Industriestrasse 2, 79541 Lörrach, Deutschland, [www.practomed.de](http://www.practomed.de)

En cas de doute, demander conseil à un expert.

Tout incident grave survenu avec ce produit doit être signalé au fabricant (Practomed) ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi en tant qu'utilisateur ou patient.

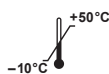


clip / pince / Schlauchklemme / klem /  
abrazadera de la manguera

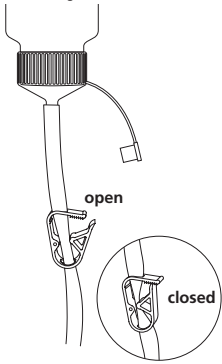


REF PR101

REF PR102

REF PR103

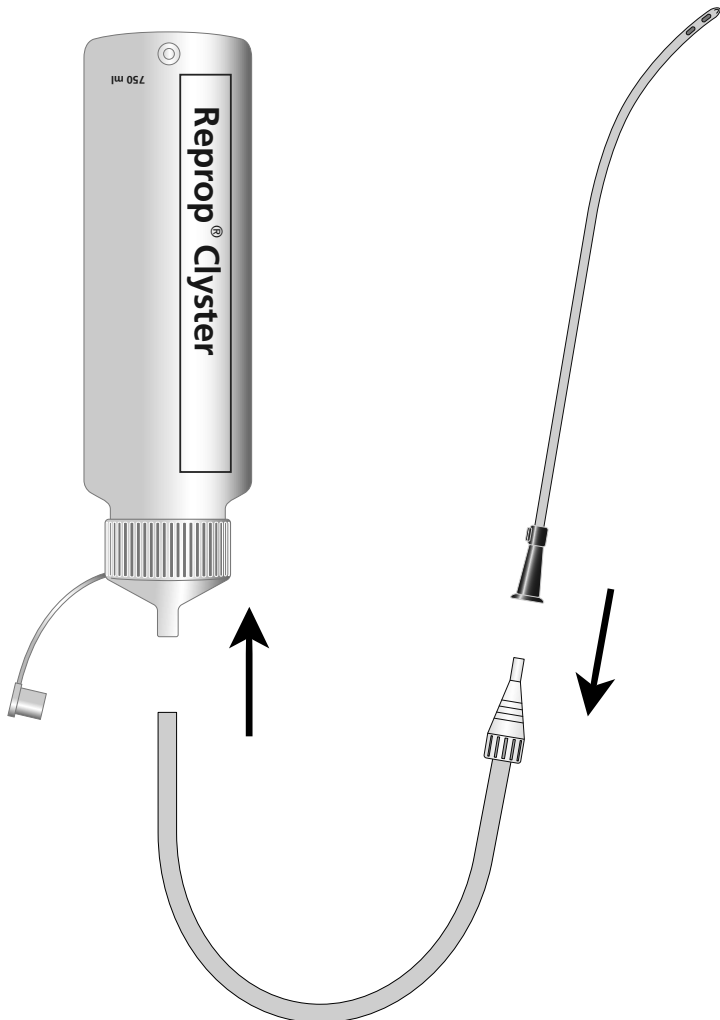

clip / pince / Schlauchklemme / klem /  
abrazadera de la manguera

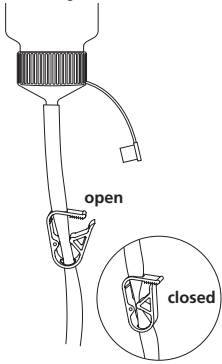

REF PR104

REF PR105

REF PR106

