

Gebruiksaanwijzing

Werking: Door het water naar binnen te pompen ontstaat er een verwerking en verdunning van de stoelgang enerzijds en anderzijds een prikkel in de endeldarm. Als de hoeveelheid ingebrachte vloeistof groot genoeg is ontstaan er peristaltische darmbewegingen en dat leidt ten slotte tot een leegloop van de darmen.

Toepassingen: Bij het snel willen verhelpen van een opstopping bij de darmen, voor het opwekken van darmactiviteit bij darmproblemen, voor het gecontroleerd legen van de darmen bij incontinentie, of voor een darmspoeling tijdens het vasten.

Speciale toepassingen voor specialisten: voor het snel legen van de darmen voor een operatie, ter voorbereiding van een geboorte, voor een rectoscopie, bij een onderzoek in de onderbuik en bij het gecontroleerd legen van de darmen bij een colostomie.

Bij de volgende indicaties mag geen spoeling gebruikt worden: bij acute buik en of onderbuikklachten (bij buikpijn en bij onduidelijke symptomen), bij beschadigingen van de anus.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: alleen schoon water gebruiken. Het glijmiddel op de rectumkatheter aanbrengen om irritatie aan het anaal kanaal te voorkomen. Als er weerstand of pijn ontstaat tijdens het inbrengen van de katheter moet u de actie stoppen en dient u de arts te raadplegen.

Zwangerschap: Zwangere vrouwen tot de 20e week kunnen voor de ontlasting Klysmas gebruiken. Vanaf de 21e week raden wij u aan geen klysmas zonder overleg met vroedvrouw, vrouwelijke of mannelijke arts uit te voeren, omdat onder bepaalde omstandigheden weeën geactiveerd kunnen worden.

Gebruik bij kinderen en adolescenten/jongeren: We bevelen het gebruik van een klysmas bij kinderen enkel met toestemming van het kind aan. Tevens de hoeveelheid water aanpassen aan de leeftijd van het kind.

Aanwijzingen voor het inbrengen:

Spoel de fles volledig uit en af met schoon water voor het eerste gebruik. Was uw handen grondig voor en na de darmspoeling.

Vorbereiding: fles vullen met zuiver, lichaam warm water, afsluiting aanschroeven. Terugslagklep met de darmbus verbinden plus verlengingsbuis met de fles monteren (Klem optional). Zo nodig handschoenen, glijmiddel, waterdicht stootkussen en afvalbak beschikbaar stellen!

Aanwijzing rectumkatheter: De rectumkatheter heeft voor het afvoeren van water twee openingen die aan de zijkant rond zijn. In zeldzame gevallen wordt ervaren dat de openingen niet rond genoeg zijn. Beoordeel de rectumkatheter voor gebruik.

Voor de patiënt bij zelf gebruik: Neem een makkelijke houding aan op het toilet of ga op uw rug op de grond liggen en breng de katheter enige centimeters in. Zet de fles op zijn kop en pomp het water langzaam naar binnen door

Starter Set "Basic"

REF PR101

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindings slang met terugslagventiel
3 stuks rectumkatheter

Starter Set "Plus"

REF PR102

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindings slang met terugslagventiel
6 stuks rectumkatheter
1 opbergetui

Vervanging producten

REF PR103

Onderdelen: 1 verbindings slang met terugslagventiel
20 stuks rectumkatheter

Starter-Set "Basic" comfort

REF PR104

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindings slang met terugslagventiel
1 verbindings slangen met twee trechter
1 rectumkatheter met olijfvorm

Starter-Set "Plus" comfort

REF PR105

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindings slang met terugslagventiel
1 verbindings slangen met twee trechter
1 rectumkatheter met olijfvorm
"Plus": 1 opbergetui

Vervanging producten comfort

REF PR106

Onderdelen: 1 verleng slang met terugslagventiel
3 verbindings slangen met twee trechter
3 stuks rectumkatheter met olijfvorm

regelmatig in de fles te knijpen. Trek daarna de rectumkatheter eruit en laat de vloeistof uit de darmen lopen. Indien nodig deze handeling herhalen.


Voor verpleegkundigen voor gebruik bij patiënten: Leg de patiënt met zijn benen gehoekt op de linker zijde. Breng de rectum katheter voorzichtig in. De fles op zijn kop zetten en het water in de darmen pompen. De katheter verwijderen. Indien nodig de patiënt behulpzaam zijn bij het opvangen van de vloeistof.

Aanbevelingen voor het reinigen bij hergebruik: Wij raden u aan vanwege hygienische redenen het apparaat **uitsluitend persoonlijk te gebruiken**. Onderdelen van de Reprop Clyster, de fles, de afsluiter, en de verbindings slang met terugslagklep kunnen na gebruik met water en zeep worden gereinigd.

Alle rectumkatheters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.


Opslagcondities: Droog en in een stofvrije ruimte opslaan.

Verdere informatie: www.reprop.de, www.reprop.nl


 Practomed UG, Industriestrasse 2, 79541 Lörrach, Deutschland, www.practomed.de

Bij onduidelijkheden uw leverancier raadplegen.

Alle ernstige incidenten die zich in verband met dit product voordoen, moeten worden gemeld aan de fabrikant (Practomed) en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u als gebruiker of patiënt bent gevestigd.

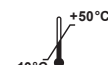


clip / pince / Schlauchklemme / klem /
abrazadera de la manguera

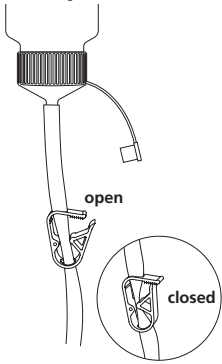


REF PR101

REF PR102

REF PR103

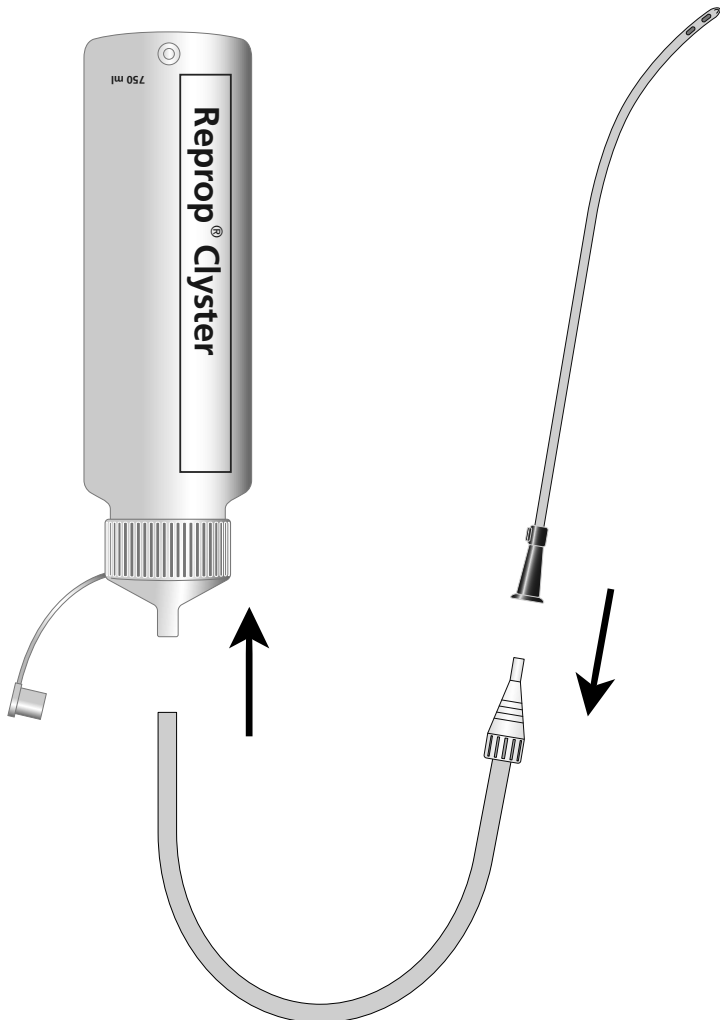

clip / pince / Schlauchklemme / klem /
abrazadera de la manguera

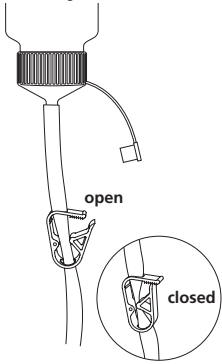

open

closed

REF PR104

REF PR105

REF PR106

